



Πάνω από
100
ΧΡΟΝΙΑ

Ορθοπεδικός σας!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

134563 | VT510
ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ



VITA ORTHOPEDICS, ΙΚΕΤΤΑ 3, 10442 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

T: 210.8837379, 210.8211783, F: 210.8218290, E: info@vita-orthopedics.gr, www.vita-orthopaedics.gr

1. Προκαταρκτική παρατήρηση

Οι οδηγίες χρήσης περιγράφουν την προετοιμασία, τη λειτουργία, τη χρήση, τη συντήρηση και τη φροντίδα του προϊόντος. Ως εκ τούτου, χρησιμεύει στον χρήστη ως βάση για την ασφαλή χρήση του αναπηρικού σας αμαξιδίου. Για να κάνετε πλήρη χρήση του προϊόντος και να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά.

2. Εύρος παράδοσης

- 1 x Κουτί συσκευασίας / μεταφοράς
- 1 x Πολυλειτουργικό αναπηρικό αμαξίδιο προσυναρμολογημένο
- 2 x Υποπόδια
- 1 x Οδηγίες χρήσης

Το πολυλειτουργικό αναπηρικό αμαξίδιο TMM παραδίδεται προσυναρμολογημένο σε κουτί από χαρτόνι. Εάν είναι δυνατόν, κρατήστε το κουτί από χαρτόνι, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση αργότερα. Μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων, ελέγξτε αμέσως ότι το προϊόν είναι πλήρες και άθικτο.

3. Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Πριν χρησιμοποιήσετε το αναπηρικό σας αμαξίδιο για πρώτη φορά, σας συνιστούμε να εξασκηθείτε στη χρήση με παρουσία βοηθού, προκειμένου να αποφύγετε καταστάσεις κινδύνου. Πριν την χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα προσαρτημένα μέρη είναι σωστά στερεωμένα.
- Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι η αναπηρική καρέκλα σας είναι ανέπαφη, ότι όλα τα ρυθμιζόμενα μέρη είναι σωστά στερεωμένα και ότι τα φρένα λειτουργούν.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο μοχλός φρένου του γόνατος κατά τη στάθμευση για να αποτρέψετε την κύλιση της αναπηρικής πολυθρόνας.
- Σε κλίση άνω των 10° υπάρχει κίνδυνος ανατροπής, χρησιμοποιήστε τον τροχό anti-tip.
- Το αναπηρικό αμαξίδιο είναι κατάλληλο μόνο για μεταφορά ενός ατόμου.
- Η μεταφορά φορτίων ή πολλών ατόμων θεωρείται κακή χρήση.
- Ο κίνδυνος ανατροπής μπορεί να αυξηθεί εάν υπάρχει αλλαγή ισορροπίας λόγω κινήσεων του σώματος ή φόρτισης.
- Για να ξεπεράσετε τα εμπόδια, χρησιμοποιείτε ράμπες.
- Μην πατάτε τα υποπόδια για να καθίσετε ή να σηκωθείτε.
- Κατά την αναδίπλωση και το ξεδίπλωμα, υπάρχει κίνδυνος να παγιδευτούν μέρη του σώματος και τα ρούχα.
- Λάβετε υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο παγίδευσης κατά την αλλαγή της γωνίας της πλάτης καθίσματος και κατά τη χρήση της λειτουργίας κλίσης για τον χρήστη, τον ασθενή και τρίτα μέρη.

Όλα τα σοβαρά περιστατικά που σχετίζονται με τη συσκευή αναφέρονται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

4. Περιγραφή προϊόντος



Η ετικέτα του προϊόντος είναι πολύ σημαντική για την αναγνώριση του προϊόντος. Δεν πρέπει να αφαιρεθεί. Εάν η ετικέτα του προϊόντος γίνει δυσανάγνωστη ή χαθεί, πρέπει να αντικατασταθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο.

5. Σκοπός

Το αναπηρικό αμαξίδιο έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει την κινητικότητα και προορίζεται μόνο για τη μεταφορά ατόμων εντός του πεδίου της βασικής τους ανάγκης. Το αναπηρικό καροτσάκι είναι σχεδιασμένο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι σχεδιασμένο για μέγιστο φορτίο 150kg.

6. Ενδείξεις - αντενδείξεις

Προμήθεια σε:

- Παράλυση
- Απώλεια άκρου
- Ατέλεια άκρου / παραμόρφωση
- Συσπάσεις αρθρώσεων / φθορές αρθρώσεων
- Άλλες ασθένειες

Η χρήση του αναπηρικού αμαξιδίου δεν ενδείκνυται για:

- Διαταραχές της αντίληψης
- σοβαρές διαταραχές ισορροπίας
- Αδυναμία καθίσματος
- Απώλεια άκρων και στα δύο χέρια
- Συστολές αρθρώσεων / βλάβες και στα δύο χέρια
- Μειωμένη ή ανεπαρκής όραση

7. Τεχνικά στοιχεία

Πολυλειτουργικό αναπηρικό αμαξίδιο

Μέγιστο βάρος (kg)	150
Πλάτος καθίσματος (cm)	41-46 / 46-52 ρυθμιζόμενο
Βάθος καθίσματος (cm)	45-50 ρυθμιζόμενο
Ύψος καθίσματος (cm)	50 ανάλογα με την κλίση του καθίσματος
Ύψος πλάτης (cm)	55-60 ρυθμιζόμενο
Μπροστινά ελαστικά	7" (συμπαγείς)
Πίσω ελαστικά	24" (συμπαγείς)
Γωνία πλάτης	-6 έως 70°
Γωνία καθίσματος	-8 έως 18°
Γωνία γονάτων	90 έως 180
Ύψος υποβραχιονίου (cm)	25-30 ρυθμιζόμενο
Συνολικό πλάτος (cm)	Πλάτος μαξιλαριού καθίσματος +24
Συνολικό μήκος χωρίς υποπόδια (cm)	90
Συνολικό ύψος (cm)	110 - 120
Πλαίσιο	Σωληνοειδής χάλυβας
Ταπετσαρία πλάτης	Πολυαμίδιο με επένδυση
Μαξιλάρι καρέκλας	Πολυαμίδιο επένδυσης καθίσματος
Χρώμα	Ασημί
Βάρος	32kg

8. Ατομικές προσαρμογές

8.1 Τοποθέτηση των αποσβεστήρων πίεσης αερίου

(Εικ. 2)

Πιέστε το κάθισμα σε όρθια θέση με τα χέρια σας. Τώρα προσαρτήστε το ελατήριο πίεσης στον άξονα (εισαγάγετε τον πείρο ράμπας).

Βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του καθίσματος είναι καλά στερεωμένη!



Εικόνα 2

8.2 Τοποθέτηση των ποδιών

(Εικ. 3, 4)

Λειτουργήστε πρώτα τα φρένα του μοχλού γονάτου. Τοποθετήστε τα υποπόδια στις παρεχόμενες βάσεις.

Περιστρέψτε το υποπόδιο προς τα εμπρός μέχρι να ασφαλίσει ο μοχλός απελευθέρωσης (εμπλέκεται με ακουστικό τρόπο).

Για να αφαιρέσετε τα υποπόδια, χρησιμοποιήστε το μοχλό απελευθέρωσης. Περιστρέψτε το υποπόδιο πίσω στο πλαίσι και ανασηκώστε το προς τα πάνω από το μπουλόνι οδηγού.



Εικόνα 3



Εικόνα 4

8.3 Τοποθετήστε το πλαϊνό πάνελ

(Εικ. 5)

Λειτουργήστε το μοχλό φρένου για το γόνατο για να ασφαλίσετε την αναπηρική καρέκλα από την κύλιση.

Ξεβιδώστε τη βίδα χειρός. Εισαγάγετε τα πλαϊνά μέρη στον οδηγό σωλήνα του πλαισίου. Σφίξτε ξανά τη βίδα χειρός. Για την αποσυναρμολόγηση, προχωρήστε με την αντίστροφη σειρά.



Εικόνα 5

8.4 Προσαρμόστε το προσκέφαλο

(Εικ. 6)

Τοποθετήστε το προσκέφαλο στον οδηγό της πλάτης. Μετακινήστε το προσκέφαλο στην επιθυμητή θέση. Τέλος, σφίξτε ξανά τη βίδα χειρός.



Εικόνα 6

8.5 Τοποθέτηση των πλαϊνών μαξιλαριών

(Εικ. 7)

Λειτουργήστε το μοχλό φρένου για το γόνατο για να ασφαλίσετε την αναπηρική καρέκλα από την κύλιση. Σπρώξτε τα στηρίγματα ώμων στον αντίστοιχο οδηγό. Τέλος, σφίξτε τη βίδα χειρός στη δεξιά και την αριστερή πλευρά.



Εικόνα 7

8.6 Μαξιλάρι πλάτης

(Εικ. 8)

Λειτουργήστε το μοχλό φρένου για το γόνατο για να ασφαλίσετε την αναπηρική καρέκλα από την κύλιση. Οι ιμάντες Velcro μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση του μαξιλαριού πλάτης.



Εικόνα 8

8.7 Μαξιλάρι καθίσματος

(Εικ. 9)

Λειτουργήστε το μοχλό φρένου για το γόνατο για να ασφαλίσετε την αναπηρική καρέκλα από την κύλιση. Οι ιμάντες Velcro μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση του μαξιλαριού του καθίσματος στην επιφάνεια του καθίσματος.



Εικόνα 9

9. Ρυθμίσεις

9.1 Μοχλός φρένου γονάτου

(Εικ. 10)

Το φρένο πρέπει να είναι στερεωμένο έτσι ώστε να μην μπορεί να στρίβει και να μην είναι χαλαρό. Όταν ο μηχανισμός του φρένου είναι ανοιχτός στο μέγιστο, η απόσταση μεταξύ του μπουλονιού του φρένου και του καλύμματος του ελαστικού πρέπει να είναι περίπου 17mm στο στενότερο σημείο. Για να ρυθμίσετε/διορθώσετε την απόσταση, χαλαρώστε τη βιδωτή σύνδεση. Ρυθμίστε τα φρένα στη σωστή θέση, έτσι ώστε η απόσταση μεταξύ του μπουλονιού του φρένου και του καλύμματος του ελαστικού να είναι 17 mm. Στη συνέχεια, σφίξτε ξανά τη βιδωτή σύνδεση και ελέγξτε τη λειτουργία. Δεν πρέπει όταν πατάτε φρένο να μετακινείται το αναπηρικό αμαξίδιο. Το απελευθερωμένο φρένο δεν πρέπει να αγγίζει τα ελαστικά και να σέρνεται.




Εικόνα 9

Προσοχή! Τα λανθασμένα ρυθμισμένα φρένα μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις!

9.2 Ρυθμίστε το προσκέφαλο

9.2.1 Ρύθμιση ύψους (Εικ. 11)


Για να ρυθμίσετε το ύψος: Χαλαρώστε τη βίδα χειρός. Μετακινήστε το προσκέφαλο στο επιθυμητό ύψος. Τέλος, σφίξτε ξανά τη βίδα χειρός.

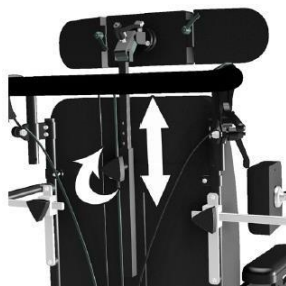

Εικόνα 11

9.2.2 Ρύθμιση βάθους (Εικ. 12)


Για να ρυθμίσετε το βάθος: Χαλαρώστε τη βίδα χειρός. Μετακινήστε το προσκέφαλο κατά μήκος της ράβδου στο επιθυμητό βάθος. Σφίξτε ξανά τη βίδα χειρός.

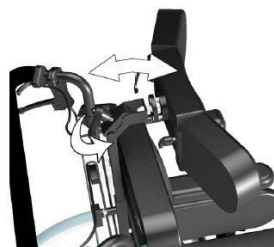

Εικόνα 12

9.2.3 Προσαρμογή στη θέση του κεφαλιού (Εικ. 13)

Χάρη στην σφαιρική άρθρωση (1), το προσκέφαλο μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας. Οι βίδες χειρός (2) σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε τα φτερά του προσκέφαλου δεξιά και αριστερά.

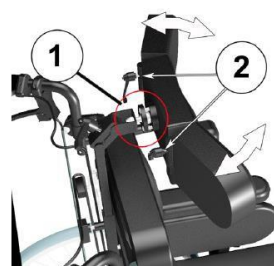


Εικόνα 13

9.3 Υποστήριξη κατά των άκρων

(Εικ. 14)

Η αντικραδαστική υποστήριξη χρησιμεύει για την αποφυγή ανατροπής προς τα πίσω. Για να ξεπεραστούν τα εμπόδια, μπορεί να ρυθμιστεί σε ύψος (7 βήματα). Για να το κάνετε αυτό, τραβήξτε τη δακτυλιοειδή ροδέλα και σπρώξτε το στήριγμα κατά της άκρης προς τα πάνω.

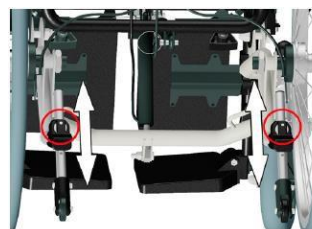

Εικόνα 14

9.4 Ρύθμιση πλαϊνού πλαισίου

9.4.1 Ρύθμιση του ύψους των υποβραχιόνων (Εικ. 15)

Ξεβιδώστε τη βίδα χειρός. Μετακινήστε το υποβραχιόνιο στην επιθυμητή θέση. Σφίξτε ξανά τη βίδα χειρός.



Εικόνα 15

9.4.2 Ρύθμιση του ύψους των πλαϊνών πλαισίων (Εικ. 16)

Λειτουργήστε το φρένο ανύψωσης γονάτων για να ασφαλίσετε την αναπηρική καρέκλα από την κύλιση. Ξεβιδώστε τη βίδα χειρός. Μετακινήστε το πλαϊνό στήριγμα στην επιθυμητή θέση. Σφίξτε ξανά τη βίδα χειρός.



Εικόνα 16

9.5 Υποπόδιο

9.5.1 Γωνία στηρίγματος ποδιού

(Εικ. 17)

Λειτουργήστε το φρένο ανύψωσης γονάτων για να ασφαλίσετε την αναπηρική καρέκλα από την κύλιση. Χαλαρώστε το μοχλό και ρυθμίστε το στήριγμα ποδιών προς τα πάνω ή προς τα κάτω μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή γωνία. Σφίξτε ξανά το μοχλό.




Εικόνα 17

9.5.2 Περιστρέψτε το στήριγμα γονάτων

(Εικ. 18)

Το στήριγμα γονάτων μπορεί να περιστραφεί σε βήματα 90°. Λειτουργήστε το φρένο ανύψωσης γονάτων για να ασφαλίσετε την αναπηρική καρέκλα από την κύλιση. Απελευθερώστε το μοχλό (ο οποίος χρησιμοποιείται επίσης για τη ρύθμιση της γωνίας γονάτων). Γυρίστε το στήριγμα γονάτων. Σφίξτε ξανά το μοχλό.

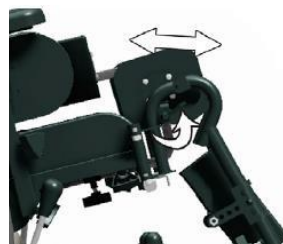

Εικόνα 18

9.5.3 Μήκος κάτω ποδιού

(Εικ. 19)

Το μήκος του κάτω ποδιού μπορεί να ρυθμιστεί σε 4 θέσεις.

Χαλαρώστε τη βίδα στερέωσης. Μετακινήστε το υποπόδιο στην επιθυμητή θέση και σφίξτε ξανά τη βίδα.



Εικόνα 19

9.5.4 Ρύθμιση ύψους του μαξιλαριού γάμπας

(Εικ. 20)

Είναι δυνατή η μετακίνηση του μαξιλαριού γάμπας πάνω και κάτω σε τρεις θέσεις. Για να το κάνετε αυτό, περιστρέψτε το μαξιλαράκι της γάμπας προς τα έξω και στη συνέχεια μετακινήστε το πάνω ή κάτω.



Εικόνα 20

9.5.5 Θέση μαξιλαριού γάμπας

(Εικ. 21)

Μπορείτε να μετακινήσετε το μαξιλαράκι της γάμπας προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Για να το κάνετε αυτό, χαλαρώστε τη βίδα της εξάγωνης υποδοχής και τοποθετήστε το επίθεμα γάμπας σε μια οπή πιο μπροστά ή προς τα πίσω. Στη συνέχεια σφίξτε ξανά τη βίδα.



Εικόνα 21

9.6 Ρύθμιση βάθους καθίσματος

(Εικ. 22)

Για να ρυθμίσετε το βάθος του καθίσματος, η βάση καθίσματος μπορεί να μετακινηθεί προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Αφαιρέστε το μαξιλάρι του καθίσματος και χαλαρώστε τις 4 εξαγωνικές βίδες της πλάκας του καθίσματος.

Τώρα προσαρμόστε το κάθισμα στην επιθυμητή θέση. Στη συνέχεια, σφίξτε ξανά τις βίδες.



Εικόνα 22

9.7 Ρύθμιση του ύψους της πλάτης

(Εικ. 23)

Για να ρυθμίσετε το ύψος της πλάτης, μετακινείτε την προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Για να το κάνετε αυτό, χαλαρώστε τις 4 εξαγωνικές βίδες στα εξαρτήματα στερέωσης των συρόμενων σωλήνων. Τώρα προσαρμόστε την πλάτη στην επιθυμητή θέση. Στη συνέχεια, σφίξτε ξανά τις βίδες.



Εικόνα 23

9.8 Τιμόνι

(Εικ. 24)

Το ύψος των τροχών μπορεί να ρυθμιστεί σε 5 θέσεις. Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε τη βιδωτή σύνδεση των αξόνων των τροχών. Φέρτε τους τροχούς στην επιθυμητή θέση και σφίξτε ξανά τη βιδωτή σύνδεση.

Κίνδυνος ανατροπής!

Υπό ορισμένες συνθήκες, ο κίνδυνος ανατροπής προς τα εμπρός μπορεί να αυξηθεί λόγω της ρύθμισης των τροχών.




Εικόνα 24

10. Χρήση

10.1 Ρύθμιση γωνίας καθίσματος

(Εικ. 25, 26)

Ασφαλίστε την αναπηρική καρέκλα σας από ακούσια κύλιση με το μοχλό φρένου γονάτων. Για ευκολότερη είσοδο και έξοδο, το κάθισμα μπορεί να γέρνει προς τα εμπρός. Λειτουργήστε τον μικρό μοχλό στις λαβές ώθησης και σπρώξτε την αναπηρική καρέκλα προς τα εμπρός από τις λαβές ώθησης. Το κάθισμα γέρνει προς τα κάτω μπροστά. Για να γείρετε το κάθισμα προς τα πίσω, χρησιμοποιήστε το μοχλό και σπρώξτε τη λαβή ώθησης προς τα κάτω.

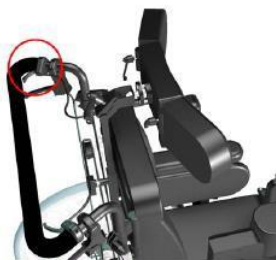

Εικόνα 25



Εικόνα 26

10.2 Ρύθμιση της γωνίας της πλάτης του καθίσματος

(Εικ. 27, 28)

Ασφαλίστε την αναπηρική καρέκλα σας από ακούσια κύλιση με το μοχλό φρένου γονάτων. Η πλάτη μπορεί να ρυθμιστεί σε γωνία -6° και έως 70° από έναν συνοδό. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τον μικρό μοχλό στις λαβές ώθησης και σπρώξτε την πλάτη στην επιθυμητή θέση.



Εικόνα 27



Εικόνα 28

10.3 Απομάκρυνση του υποστηρίγματος ποδιών

(Εικ. 29)

Για να διευκολύνετε την είσοδο, τα υποπόδια μπορούν να περιστραφούν προς τα έξω. Για να το κάνετε αυτό, ενεργοποιήστε πρώτα τα χειρόφρενα. Λειτουργήστε το μοχλό απελευθέρωσης στο υποπόδιο. Τώρα το υποπόδιο μπορεί να στραφεί προς τα έξω κατά 90° . Για να το επαναφέρετε στην αρχική του θέση, απλώς στρέψτε το κατά 90° προς το κέντρο.



Εικόνα 29

10.4 Αποσυναρμολόγηση του υποστηρίγματος ποδιών

(Εικ. 30)

Διπλώστε τα πατάκια. Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης στο υποπόδιο και τραβήξτε τον προς τα πάνω έξω από τη θήκη. Για τη συναρμολόγηση, προχωρήστε με την αντίστροφη σειρά.



Εικόνα 30

10.5 Μετατόπιση των μαξιλαριών γάμπας

(Εικ. 31)

Μπορείτε να περιστρέψετε το μαξιλαράκι της γάμπας προς τα έξω για ευκολότερη είσοδο και έξοδο. Για να το κάνετε αυτό, περιστρέψτε το μαξιλαράκι της γάμπας προς τα έξω και στη συνέχεια μετακινήστε το πάνω ή κάτω.



Εικόνα 31

10.6 Αναδίπλωση των ποδιών

(Εικ. 32)

Για ευκολότερη είσοδο και έξοδο, τα πατάκια των υποποδιών μπορούν να αναδιπλωθούν. Περιστρέψτε πρώτα τα μαξιλαράκια γάμπας στο πλάι (10,5).



Εικόνα 32

10.7 Αφαίρεση των πλαϊνών πλαισίων

(Εικ. 33)

Τα πλαϊνά μέρη μπορούν να αφαιρεθούν για μεταφορά και για να διευκολυνθεί η είσοδος από το πλάι. Για να το κάνετε αυτό, χαλαρώστε τη βίδα χειρός στο κάτω μέρος του υποβραχιονίου. Στη συνέχεια, μπορείτε να αφαιρέσετε το πλαϊνό μέρος ανασπώνοντάς το προς τα πάνω.



Εικόνα 33

10.8 Οδήγηση και πέδηση

(Εικ. 35)34,

Το αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να φρενάρει από έναν συνοδό πατώντας τα χειρόφρενα στη λαβή ώθησης (TMM-TB). Τα χειρόφρενα μπορούν επίσης να κλειδώσουν. Για τη στάθμευση, τα μοχλοφρένα γονάτων ενεργοποιούνται προς τα εμπρός. Το αναπηρικό καροτσάκι μπορεί επίσης να οδηγηθεί μόνο του. Για να γίνει αυτό, το αμαξίδιο οδηγείται από τις χειρολαβές. Οι χειρολαβές είναι διαθέσιμες για το φρενάρισμα της κίνησης.

Το μοχλόφρενο γονάτων είναι χειρόφρενο και δεν είναι κατάλληλο για μείωση της ταχύτητας οδήγησης!




Εικόνα 34



Εικόνα 35

10.9 Οδήγηση πάνω από εμπόδια

Τα αντικραδασμικά βοηθήματα δεξιά και αριστερά του πλαισίου του αμαξιδίου επιτρέπουν στον συνοδό να κάνει ανάκλιση στο αναπηρικό αμαξίδιο πιο εύκολα. Πάτησε το αντι-ανατρεπόμενο με το πόδι σου. Διατηρήστε την ισορροπία σας με τις λαβές ώθησης.

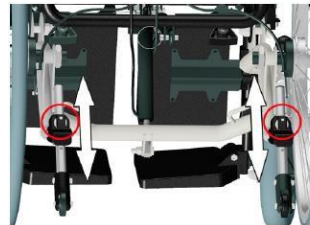

10.10 Μπαίνει και βγαίνει από μπροστά

Λειτουργήστε το μοχλό φρένου γονάτου. Για να διευκολύνετε την είσοδο και έξοδο, περιστρέψτε τα υποπόδια προς τα έξω (10.3) και καθίστε αργά στο κάθισμα.

Πατάτε στα υποπόδια μόνο όταν κάθεστε στο αναπηρικό καροτσάκι. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ανατροπής!

10.11 Είσοδος και έξοδος από το πλάι

Λειτουργήστε το μοχλό φρένου γονάτου. Για να διευκολύνετε την είσοδο και έξοδο από το πλάι, μπορείτε να αφαιρέσετε τα πλαϊνά μέρη (10.7). Επιπλέον, αφαιρέστε το υποπόδιο από την πλευρά εισόδου (10.3) και καθίστε αργά στο κάθισμα.

10.12 Αφαίρεση των κινητήριων τροχών

(Εικ. 38)

Οι κινητήριοι τροχοί μπορούν να αφαιρεθούν για αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου. Πρώτα ασφαλίστε το αναπηρικό καροτσάκι ώστε να μην ανατραπεί. Τώρα μπορείτε να απελευθερώσετε τον κινητήριο τροχό από τη θήκη πιέζοντας τον άξονα ταχείας απελευθέρωσης και αφαιρέστε τον από το αναπηρικό καροτσάκι.




Εικόνα 38

10.13 Ασφάλιση κατά τη μεταφορά σε οχήματα

(Εικ. 39, 40),

Για να ασφαλίσετε το αναπηρικό καροτσάκι κατά τη μεταφορά με οχήματα, υπάρχουν τέσσερις κρίκοι στερέωσης στο κύριο πλαίσιο, δύο ο καθένας μπροστά και πίσω. Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένους ιμάντες πρόσδεσης για να ασφαλίσετε την αναπηρική καρέκλα κατά τη μεταφορά.

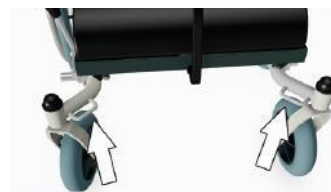

Εικόνα 39



Εικόνα 40

11. Καθαρισμός

Τα μέρη του πλαισίου μπορούν να σκουπιστούν με ένα υγρό πανί. Για πιο βαριά βρωμιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο καθαριστικό. Η ταπετσαρία της πλάτης και του καθίσματος μπορεί να πλυθεί με ένα ήπιο διάλυμα με σαπουνόνερο και, εάν είναι απαραίτητο, να υποβληθεί σε επεξεργασία με απολυμαντικό του εμπορίου.

Μη χρησιμοποιείτε εξοπλισμό εκτόξευσης ατμού ή λειαντικά ή διαβρωτικά καθαριστικά.

Οι τροχοί μπορούν να καθαριστούν με μια υγρή βούρτσα με πλαστικές τρίχες. Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε συρματινή βούρτσα!

12.Επαναχρησιμοποίηση

Το αναπηρικό αμαξίδιο TMM / TMM TB έχει σχεδιαστεί για επαναχρησιμοποίηση.

Το αναπηρικό καροτσάκι πρέπει να ελεγχθεί ως προς την πληρότητα και τη λειτουργικότητά του πριν παραδοθεί. Το αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να καθαριστεί, να απολυμανθεί, να συντηρηθεί και να εγκριθεί από τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο.

13.Συντήρηση

Συνιστάται το αναπηρικό αμαξίδιο να επιθεωρείται από εξειδικευμένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή ελαττωμάτων στο αμαξίδιο, πρέπει να παραδοθεί αμέσως στον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Μετρήστε	Καθημερινά	Μηνιαίο	Ετήσιο	Σχόλιο
Ρουλεμάν τροχών λαδιού			X	Μέσω εξειδικευμένου εμπορίου
Ελέγξτε τα φρένα	X	X	X	Από χρήστες και εξειδικευμένο εμπόριο
Ακεραιότητα της ταπετσαρίας		X	X	Από χρήστες και εξειδικευμένο εμπόριο
Ακεραιότητα των μερών του πλαισίου		X	X	Από χρήστες και εξειδικευμένο εμπόριο
Ακεραιότητα των συνδέσεων		X	X	Από χρήστες και εξειδικευμένο εμπόριο

14.Διάρκεια ζωής προϊόντος

Υποθέτουμε ότι η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι πέντε χρόνια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το προϊόν να χρησιμοποιείται για τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές συντήρησης και ασφάλειας στις οδηγίες λειτουργίας.

15.Απόθεση και ανακύκλωση

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της TRENDMOBIL για τη σωστή απόρριψη και ανακύκλωση του προϊόντος σας και της συσκευασίας του.

16.Εγγύηση

Η εγγύηση αντιστοιχεί στους νόμιμα προβλεπόμενους 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Αυτή η εγγύηση περιλαμβάνει ελαττώματα του προϊόντος που αποδεδειγμένα οφείλονται σε ελαττώματα υλικού ή κατασκευής.

Οι ζημιές που προκαλούνται από φυσική φθορά, από πρόθεση, από αμέλεια ή ακατάλληλη λειτουργία ή χρήση εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγύησης.

Η εγγύηση είναι επίσης άκυρη εάν χρησιμοποιούνται ακατάλληλα καθαριστικά,