ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: *ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ*

USER MANUAL: *HOSPITAL BED*

REF :0805905







CE

1. Πρόλογος:

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν της MOBIAK A.E. Το εγχειρίδιο προϊόντος είναι ένα σημαντικό έγγραφο που σας παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. **Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν**. **Μάθετε το προϊόν και εξασκηθείτε πριν γίνει κάποια εφαρμογή.**

- Αυτό το εγχειρίδιο ισχύει για το μοντέλο μας: **0805905.**
- Οι σχολιασμοί και οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τα πραγματικά μέρη λόγω της βελτίωσης της ποιότητας ή της αλλαγής σχεδιασμού. Ελέγξτε το προσεκτικά.
- Το προϊόν που έχετε στα χέρια σας πιθανόν να διαφέρει από αυτό στις ακόλουθες φωτογραφίες. Η διαδικασία της συναρμολόγησης είναι παρόμοια.

ΣΥΜΒΟΛΑ : Παρακαλώ συμβουλευθείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

2. Προοριζόμενη Χρήση:

Το κρεβάτι 0805905 χρησιμοποιείται για ασθενείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και χρειάζεται να μείνουν ξαπλωμένοι στο κρεβάτι. Είναι σχεδιασμένο για άτομα που πρέπει νοσηλευτούν για λόγους υγείας ή αναπηρίας σε οίκους ευγηρίας, νοσοκομειακά ιδρύματα ή και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης σχεδιάσθηκε ως άνετη λύση για την κατ' οίκον περίθαλψη ανθρώπων που χρειάζονται φροντίδα. Σκοπός του είναι να υποστηρίζει αυτή την περίθαλψη.

3. ΠΡΟΣΟΧΗ (!):

- Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να αποκατασταθεί & επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
- Η χρήση του εν λόγω προϊόντος απαγορεύεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο
- Η MOBIAK A.E απορρίπτει κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή χρήση άλλη από αυτή που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η MOBIAK A.E διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν και στο ακόλουθο εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του.
- Υπάρχει Πιθανότητα Απόκλισης των Διαστάσεων των Προϊόντων Εύρους ±3%.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό ή οποιονδήποτε διαθέσιμο προαιρετικό εξοπλισμό, εάν δεν έχετε πρώτα διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Εάν αδυνατείτε να κατανοήσετε τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις ή τις οδηγίες, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία υγείας, αντιπρόσωπο ή το τεχνικό προσωπικό πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη.
- Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας.
- Να φυλάξετε το παρόν έντυπο για μελλοντική χρήση.
- Να είστε προσεκτικοί όταν τα παιδιά είναι κοντά και ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
- Να μην υπερβαίνετε το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
- Απαιτείται πάντα ιδιαίτερη προσοχή εκεί που υπάρχουν κινούμενα μέρη που μπορούν να προκαλέσουν παγίδευση των άκρων και τραυματισμούς
- Μην επιχειρήσετε να σηκώσετε το προϊόν από οποιοδήποτε συναρμολογούμενο μέρος.

5. Παρουσίαση Του Προϊόντος:

- Ηλεκτρικό Νοσοκομειακό Κρεβάτι.
- Ιδανικό για μονάδες εντατικής Θεραπείας.
- Βοηθά τον ασθενή να ωφεληθεί και να έχει καλύτερη φροντίδα κατά την ανάρρωση από καρδιοχειρουργικές, αναπνευστικές, και άλλες επεμβάσεις.
- Με ένα κουμπί δίνει τη δυνατότητα στους φροντιστές να μετατρέψουν το νοσοκομειακό κρεβάτι σε καρέκλα.
- Ενσωματωμένος ελεγκτής κρεβατιού και στις δύο πλευρικά κάγκελα, βολικός για μακροχρόνια λειτουργία τόσο για τον ασθενή όσο και για τον φροντιστή.
- Τόσο η ηλεκτρική όσο και η χειροκίνητη ΚΑΡΠΑ, παρέχουν γρήγορη απελευθέρωση σε επίπεδη θέση για επείγουσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.
- Ηλεκτρική επέκταση τμήματος ποδιού.

- Ένδειξη γωνίας, τόσο για πλάτη, Trendelenburg & Anti-Trendelenburg.
- Πέμπτος τροχός για κατεύθυνση, αντικραδασμικός για καλύτερη μεταφορά.
- Κεντρικό κλείδωμα και από τις δύο πλευρές του κρεβατιού.
- Με εφεδρική μπαταρία για έκτακτη ανάγκη.
- Με νυχτερινό φως, στη μονάδα ελέγχου.
- Με λαβή ώθησης από ανοξείδωτο χάλυβα
- Με τέσσερις προφυλακτήρες στις τέσσερις γωνίες.
- Ηλεκτρικός έλεγχος ανύψωσης της πλάτης
- Ηλεκτρικός έλεγχος Ανύψωσης των ποδιών
- Ηλεκτρικός έλεγχος ρύθμισης ύψους
- Ηλεκτρικός έλεγχος trendelenburg
- Ηλεκτρικός έλεγχος anti- Trendelenburg
- Κάγκελα με μηχανισμό εύκολης αναδίπλωσης καθ' ύψος ,για άμεση πρόσβαση στον ασθενή
- Με 2τμχ μπαταρίες μολύβδου οξεός 1,3Ah, με αυτονομία περίπου 5-7 πλήρων* κύκλων λειτουργίας των κινήσεων
- Ο χρόνος που χρειάζεται για να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία είναι περίπου 12 ώρες.
- Η πλήρης επαναφόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 3 μήνες, προκειμένου να διατηρηθεί η χωρητικότητα της
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η μπαταρία θα τροφοδοτήσει αυτόματα το σύστημα. Έπειτα ακολουθείται η τυπική διαδικασία ενεργοποίησης της λειτουργίας.
- Λειτουργία ανάκλησης πλάτης με χαμηλούς κραδασμούς για μείωση των δυνάμεων όπου ασκούνται στην κοιλιακή χώρα
- Λειτουργία αυτομάτου περιγράμματος σώματος (auto contour) για έλεγχο της σωστής θέσης του ασθενούς
- Αποσπώμενη μετόπη κεφαλής και ποδιών με προφυλακτήρες για την αποφυγή πρόσκρουσης και προφύλαξης από χτυπήματα -τέσσερις προφυλακτήρες στις τέσσερις γωνίες.
- Τροχοί με κεντρικό φρένο,περιστρεφόμενοι
- Με πέμπτο τροχό ,αντικραδασμικό για κατεύθυνση και καλύτερη μεταφορά.
- Μεγάλο εύρος ρύθμισης ύψους από 56cm έως 98cm
- Ενσύρματο χειριστήριο λειτουργιών
- Ενσωματωμένο Χειριστήριο λειτουργιών εξωτερικά των κάγκελων,για χρήση από υγειονομικό προσωπικό
- Ενσωματωμένο Χειριστήριο λειτουργιών ασθενή (εσωτερικά των καγκέλων) (υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος των λειτουργιών του χειριστηρίου μέσω του ενσωματωμένου χειριστηρίου για χρήση από υγειονομικό προσωπικό εξωτερικά των καγκέλων)
- Χειροκίνητη απελευθέρωση για CPR και στις δύο πλευρές
- Κουμπί CPR στο χειριστήριο
- Βάση σεντονιών-κλινοσκεπασμάτων (βρίσκεται στο κάτω μέρος-βάση του κρεβατιού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το νοσηλευτικό προσωπικό κατά την αλλαγή σεντονιών)
- Βάση φιάλης οξυγόνου κατάλληλη για 2,3 λίτρων φιάλες
- Ενσωματωμένες υποδοχές για τοποθέτηση ασκών παροχέτευσης, ουροσυλλεκτών.
- Νυχτερινό φως για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της νύχτας
- Τόσο η ηλεκτρική όσο και η χειροκίνητη ΚΑΡΠΑ, παρέχουν γρήγορη απελευθέρωση σε επίπεδη θέση για επείγουσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.
- Κεντρικό κλείδωμα και από τις δύο πλευρές του κρεβατιού.
- Με 2 υποδοχές για τοποθέτηση στατώ ορού
- Με 2 υποδοχές για τοποθέτηση αναρτήρα
- Το κρεβάτι διαθέτει στατώ ορού τηλεσκοπικό, με 4 αναδιπλούμενους γάντζους
- Το κρεβάτι διαθέτει αναρτήρα

**Πλήρης κύκλος λειτουργία κινήσεων: Το κρεβάτι πραγματοποιεί το σύνολο των κινήσεων του, ανύψωση πλάτης, ποδιών , ρύθμιση ύψους, Trendelenburg & Reverse Trendelenburg, λειτουργία μετατροπής του κρεβατιού σε καρέκλα.*

6. <u>Επιλογή Στρώματος:</u>

Πρέπει να προμηθευτείτε το στρώμα ξεχωριστά. Χρησιμοποιήστε στρώματα ή αεροστρώματα σύμφωνα με την γνωμάτευση του Θεράποντος Ιατρού. Το μέγεθος του στρώματος να μην είναι μεγαλύτερο από αυτό του σκελετού το κρεβατιού. **Το στρώμα 0805941 ΣΤΡΩΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ "PRO I" με διαστάσεις 191 x 82 x 14cm είναι κατάλληλο για το μέγεθος του κρεβατιού.**

7. Πίνακας Χαρακτηριστικών

Κωδικός Μοντέλου	0805905
Περιγραφή	ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ
Λειτουργίες	Ηλεκτρικές & χειροκίνητες
Σκελετός	Ατσάλινος σκελετός
Πλατφόρμα κρεβατιού	Ατσάλινη
Συνολικό Μήκος (χωρίς επέκταση τμήματος ποδιών)	202cm
Συνολικό Μήκος (με επέκταση τμήματος ποδιών)	222cm
Συνολικό πλάτος (με τα κάγκελα πάνω)	100cm
Συνολικό πλάτος (με τα κάγκελα κάτω)	98cm
Επιφάνεια στρώματος	196 x 90cm
Ελάχιστο ύψος	56 cm
Μέγιστο ύψος	98 cm
Εύρος Κλίσης Πλάτης	0-75°
Εύρος Κλίσης Ποδιών	0-45°
Trendelenburg	0-15°
Reverse Trendelenburg	0-15°
Τροχοί	4 τεμ , 15cm , με φρένο
Πέμπτος τροχός	1 τεμ, 10cm
Μέγιστο Φορτίο	250 Kg
Τάση	100-240V
Συχνότητα	50/60 Hz
Αδιάβροχο καλώδιο και βύσμα νοσοκομειακού τύπου	IPX4
Βάρος προϊόντος	250kg
Βαφή σκελετού	Ηλεκτροστατική
Μοτέρ	5


8. Προφυλάξεις Χρήσης


- Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα φορτίου για οποιονδήποτε λόγο.
- Όταν κατεβάζετε το τμήμα κεφαλής ή το τμήμα του ποδιού, βεβαιωθείτε ότι κανένας δεν εισάγει χέρια, πόδια ή άλλα μέρη σώματος κάτω από τη βάση του κρεβατιού.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια δαπέδου που στηρίζει το κρεβάτι είναι επίπεδη


9. Πριν από Κάθε Χρήση:


- Ελέγξτε εάν ο σκελετός έχει υποστεί ζημιά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος. Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό,
- Σε περίπτωση ζημιάς, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
- Ελέγξτε εάν το προϊόν έχει συναρμολογηθεί σωστά και όλες οι βίδες είναι ασφαλείς και καλά βιδωμένες.
- Ελέγχετε πάντα την κατάσταση φθοράς των μηχανικών μερών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτα ασφαλής χρήση του προϊόντος για ανθρώπους και αντικείμενα.
- Σε περίπτωση ζημιάς, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο

Εικόνες Σωστής Και Λανθασμένης Χρήσης Προϊόντος:

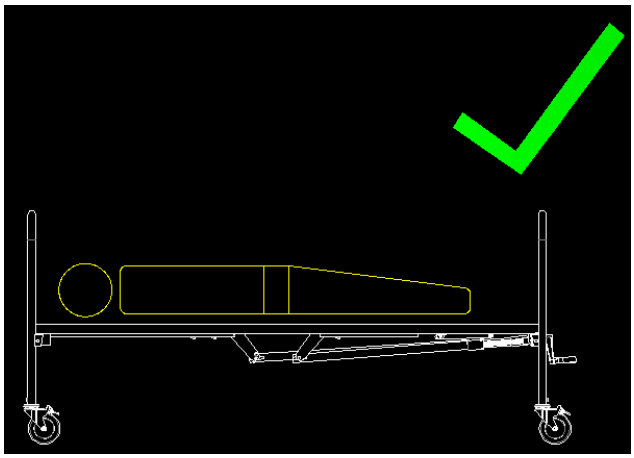

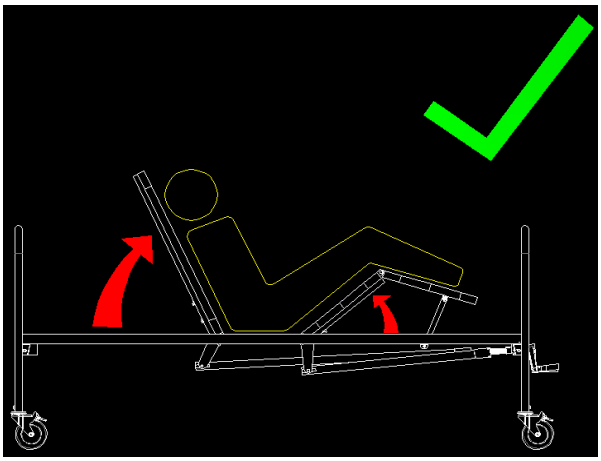

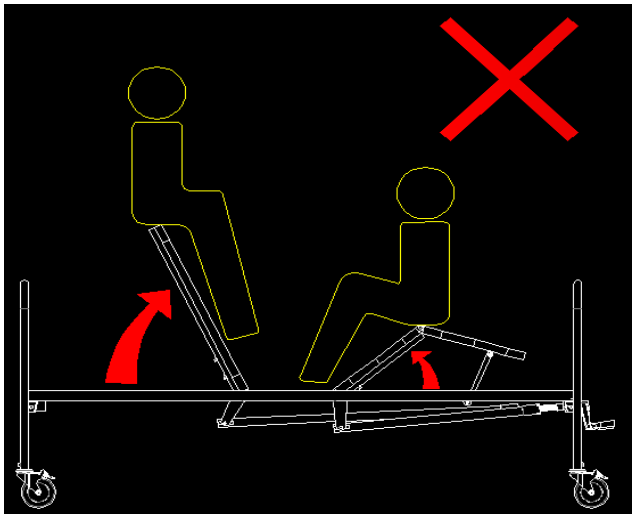

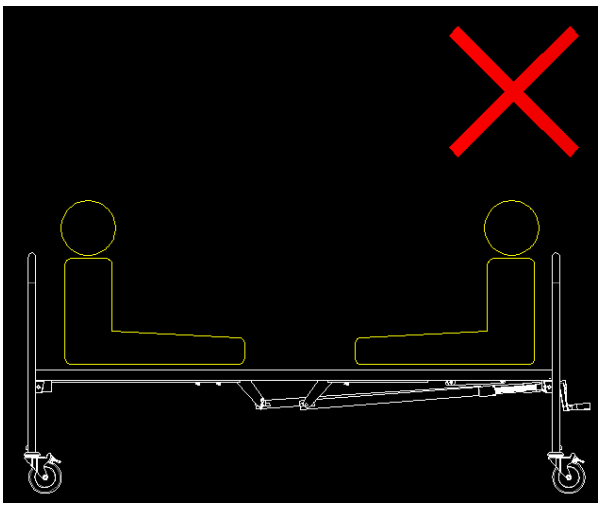

10. Συναρμολόγηση:

- Το προϊόν έρχεται συναρμολογημένο έτοιμο για χρήση.
- Αφαιρέστε το προϊόν από την συσκευασία.
- Απελευθερώστε όλες τις συνδέσεις και συνδεσμολογίες από τα δεματικά.
- Τοποθετήστε την πρίζα σε παροχή ρεύματος.
- Πιέστε τα κατάλληλα πλήκτρα στο πάνελ λειτουργιών για να ρυθμίσετε την κλίση σε πλάτη, πόδια & γόνατα καθώς και το επιθυμητό ύψος του κρεβατιού από το πάτωμα.
- Θα χρειαστεί να τοποθετήσετε τα κάγκελα και την μετόπη κεφαλής και ποδιών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικονογραφήσεις για την συναρμολόγηση είναι ενδεικτικές για να κάνουν ευκολότερη την συναρμολόγηση ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές από την πραγματικότητα. Στην συσκευασία περιλαμβάνονται εργαλεία για την συναρμολόγηση.

Πάνελ Κεφαλιού.



Τοποθετήστε την μετόπη κεφαλιού στην οπή.

Γυρίστε τον γάντζο προς την οπή, για να κλειδώσετε το πάνελ του κεφαλιού.



Πάνελ Ποδιών



Τοποθετήστε το πάνελ των ποδιών μέχρι να ακουστεί ο ήχος "κλικ".

Για να το αφαιρέσετε, πιέστε το μάνταλο προς τα έξω και τραβήξτε το πάνελ προς τα έξω.



Πεντάλ πέμπτου Τροχού



Πεντάλ φρένου

Τραβήξτε το μοχλό για να κατεβάσετε το κάγκελο.

Ένδειξη Λυχνίας




Όταν είναι ενεργοποιημένο, είναι πράσινο

Όταν είναι Πράσινο το κεντρικό φρένο δεν είναι ενεργοποιημένο.




Το φως ανάβει πράσινο όταν το «νυχτερινό φως» είναι ενεργοποιημένο.

Ενσωματωμένος ελεγκτής κρεβατιού

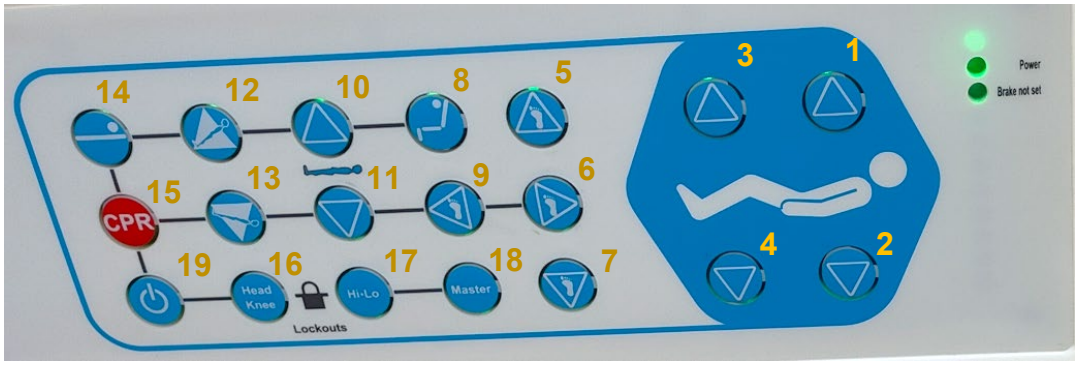

1) Πλάτη προς τα πάνω
2) Πλάτη προς τα κάτω
3) Γόνατα προς τα πάνω
4) Γόνατα προς τα κάτω
5) Ανύψωση Ποδιών
6) Επέκταση Ποδιών (προς τα έξω)
7) Αναδίπλωση ποδιών προς τα κάτω
8) Θέση καρέκλας με πάτημα ενός κουμπιού
9) Αναδίπλωση επέκτασης ποδιού
10) Ύψος κρεβατιού προς τα πάνω
11) Ύψος κρεβατιού προς τα κάτω.
12) Reversed Trendelenburg
13) Trendelenburg
14) Ηλεκτρική ανάκτηση σε επίπεδη θέση
15) Ηλεκτρονικό κουμπί CPR
16) Κλείδωμα για τα πόδια & το κεφάλι
17) Κλείδωμα για το ύψος κρεβατιού
18) Κλείδωμα όλων των λειτουργιών
19) Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση

Ενσύρματο χειριστήριο λειτουργιών

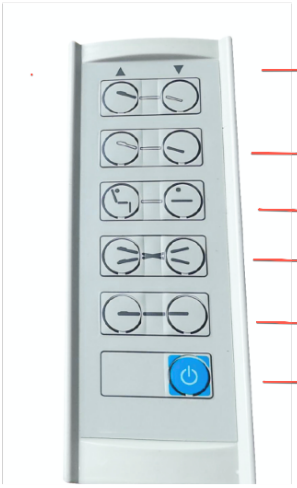

Backrest up and down	Ανύψωση και κατέβασμα πλάτης
Legrest up and down	Ανύψωση και κατέβασμα ποδιών
Auto countor	Λειτουργία AUTO CONTOUR*
Reversed trendelenburg and trendelenburg	Λειτουργία Reversed Trendelenburg & Trendelenburg
Height up and down	Ύψος κρεβατιού πάνω & κάτω
Power indicator	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Βάση φιάλης οξυγόνου

Προσαρμόστε την βάση φιάλης οξυγόνου στην μετόπη κεφαλής.

Είναι κατάλληλη για 2,3 λίτρων φιάλες οξυγόνου



11. Συντήρηση:

Ελέγχετε το Προϊόν μετά από κάθε χρήση. Ο έλεγχος έχει ως στόχο να διερευνήσει οτιδήποτε μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την ορθή λειτουργία του προϊόντος. Ελέγξτε το προϊόν για τυχόν χαλαρότητα, ρωγμές, σπασίματα, λυγισμένα ή κατεστραμμένα μέρη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να αποκατασταθεί.

12. Καθαρισμός Και Απολύμανση:

- Χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί και ήπιο σαπούνι στις επιφάνειες όπου χρήζουν καλύτερο καθαρισμό.
- ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν βρεγμένο ή λερωμένο με σκόνη ή λάσπη.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του πλαισίου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της επίστρωσης του προϊόντος.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κάνετε χρήση όξινων ή καυστικών διαλυμάτων. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή καθαριστικά λεκέδων.
- Εάν πρέπει να απολυμάνετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα κοινό, ήπιο απολυμαντικό, αφού έχετε διαβάσει τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του απολυμαντικού.
- Προστατέψτε το προϊόν από εκδορές, κοψίματα και τρυπήματα

13. Συνθήκες Φύλαξης και Μεταφοράς:

Το προϊόν θα πρέπει να φυλάσσεται συσκευασμένο με τις παρακάτω συνθήκες:

- Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε ξηρό και αεριζόμενο μέρος και δεν πρέπει να τοποθετείται σε περιβάλλον με υψηλή και γρήγορες αλλαγές θερμοκρασία.
- ΜΗΝ φυλάσσετε το προϊόν σε τοποθεσίες που βρίσκονται κοντά σε πηγές υψηλής θερμοκρασίας ή υφίστανται άμεση ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Το προϊόν πρέπει να είναι απομονωμένο από χημικά και διαβρωτικές ουσίες.
- Το προϊόν πρέπει να είναι συσκευασμένο για να προστατεύεται από τη σκόνη, και τα μέρη που μπορεί να επηρεαστούν ή να καταστραφούν από οξείδωση να τα έχουμε ελαφρώς λιπάνει.
- Κατά την μεταφορά και την αποθήκευση, όταν είναι συσκευασμένο, το μέγιστο ύψος της στοίβας είναι έξη στρώσεις.
- Το προϊόν μπορεί να μεταφερθεί με ένα οποιοδήποτε κοινό όχημα.

14. Προστασία Περιβάλλοντος:



Εάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
3) Διαθέτοντας τον άχρηστο πλέον προϊόν σας στα σωστό σημείο ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.
4) Τα ηλεκτρικά προϊόντα λόγω των δομικών υλικών τους, εάν δεν απορριφθούν σωστά, μπορεί να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικούς και επιπλέον κινδύνους για την υγεία.

15. Αναφορά Συμβάντος:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

16. Δήλωση Συμμόρφωσης

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2017/745 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

17. Όροι Εγγύησης

Το προϊόν, από την ημερομηνία αγοράς, φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) χρόνια.

Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.
Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθειρόμενα μέρη όπως την ταπετσαρία, τον τροχό, το ελαστικό του τροχού, τη ζώνη ασφαλείας, υποπόδια ή φρένα και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρας του χρόνου.Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται) & εταιρίες μεταφορών.Καμία εργασία ή ανταλλακτικό δεν καλύπτεται αν δεν έχει ελεγχτεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον κατασκευαστή του προϊόντος. Τα έξοδα μεταφοράς για τον έλεγχο πληρώνονται από τον χρήστη ή πελάτη ή από το κατάστημα λιανικής. Όταν υποβάλλετε αίτημα για κάλυψη εντός εγγύησης, να προσκομίζετε έγκυρη απόδειξη αγοράς και τη φόρμα εγγύησης συμπληρωμένη, με φωτογραφία τον σειριακό αριθμό του προϊόντος και φωτογραφία ή βίντεο το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν μπορεί να προσκομίσει τα παραπάνω έγγραφα, εάν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το προϊόν ή το εξάρτημα εξακολουθεί να βρίσκεται εντός της περιόδου εγγύησης, ενδέχεται να μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα του χρήστη για κάλυψη στο πλαίσιο της εγγύησης, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:	
ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:	
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:	
LOT:	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	
	ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

CE

1. Introduction

We would like to thank you for choosing a MOBIAK SA product. The product user manual is an important document that provides you with information on how to use it and technical features. **Please read the user manual carefully before using the product. Learn the product and practice before any application.**

- This manual applies to our model: **0805905.**
- The annotations and illustrations in this manual might be slightly different with the real parts due to quality improvement or changing design. Please check it carefully.
- The product you have in your hands may differ from the one in the following photos. The assembly process is similar.

SYMBOLS: Please refer on ANNEX A

2. Intended Use:

The 0805905 bed is used for patients who have health problems and need to stay in bed. It is designed for people who need to be hospitalized for health or disability reasons in nursing homes, hospitals or healthcare facilities. It was also designed as a comfortable solution for home care of people who need care. Its purpose is to support this care.

3. CAUTION (!):

- In case of damage or malfunction of your product DOT NOT use the product and please contact the authorized and trained representative.
- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual.
- MOBIAK S.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product.
- MOBIAK S.A reserves the right to change the information contained in this document without previous notice.
- There is a ± 3%. Deviation for the Dimensions of the Products.

4. GENERAL WARNINGS:

- If you don't read this user manual, it is preferable not to use this product or another available part.
- If you don't understand the usage or the precautions, please contact with the dealer or the proper technical person before you use the product because may be caused damage.
- Keep away the product from heat sources.
- Save this document for future reference.
- Be careful when children are nearby and do not allow the children to play with the product.
- Do not exceed the maximum load capacity.
- Special care is always required where there are moving parts that can cause limb entrapment and injury.
- Do not attempt to lift the product by any removable parts.

5. Product Presentation:

- Electric Hospital Bed.
- Ideal for Intensive Care Units.
- Helps the patient benefit and have better care during recovery from cardiac, respiratory, and other procedures.
- With one button, it enables caregivers to convert the hospital bed into a chair.
- Integrated bed controller on both side rails, convenient for long-term operation for both the patient and the caregiver.
- Both electric and manual CPR, provide quick release to a flat position for emergency cardiopulmonary resuscitation.
- Electric leg section extension.
- Angle indication, both for back, Trendelenburg & Anti-Trendelenburg.
- Fifth wheel for direction, anti-vibration for better transportation.
- Central locking on both sides of the bed.
- With emergency battery backup.
- With night light, on the control unit.
- With stainless steel push handle
- With four bumpers on the four corners.
- Electric backrest lift control

- Electric leg lift control
- Electric height adjustment control
- Electric trendelenburg control
- Electric anti-Trendelenburg control
- Rails with easy height folding mechanism, for immediate access to the patient
- With 2 pcs of 1.3Ah lead-acid battery, with an autonomy of approximately 5-7 full* cycles of movement operation
- The time needed to fully charge the battery is approximately 12 hours.
- The battery should be fully recharged every 3 months, in order to maintain its capacity
- In the event of a power outage, the battery will automatically power the system. The standard activation procedure is then followed.
- Low-vibration back recline function to reduce forces exerted on the abdomen
- Auto contour function to check the correct patient position
- Removable head and footboard with bumpers to prevent impact and protect against impacts - four bumpers at the four corners.
- Castors with central brake, rotating
- With fifth wheel, anti-vibration for direction and better transport.
- Wide height adjustment range from 56cm to 98cm
- Wired controller
- Built-in Function Control on the external part of the siderails for use by healthcare personnel
- Built-in Patient Function Control (in the internal part of the siderails)-(control functions can be locked via the built-in control for use by healthcare staff)
- Manual release for CPR on both sides
- CPR button on the control panel
- Sheet-bed linen base (located at the bottom-base of the bed and can be used by nursing personnel when changing sheets)
- Oxygen cylinder base suitable for 2,3 liters cylinders
- Integrated slots for placing drainage bags, urine collectors
- Night light for better patient service during the night
- Both electric and manual CPR provide quick release to a flat position for emergency cardiopulmonary resuscitation.
- Central locking on both sides of the bed
- With 2 hole bases for placing I.V stands
- With 2 hole bases for placing lifting poles
- With an adjustable I.V stand, with 4 folding hooks
- With lifting pole

**Full operating cycle: The bed performs all of its movements, back and leg lifting, height adjustment, Trendelenburg & Reverse Trendelenburg, bed-to-chair conversion function.*

6. Mattress Selection

The mattress must be purchased separately. Use mattresses or air mattresses according to the opinion of the attending physician. The size of the mattress should not be larger than the bed frame. The mattress **0805941 HOSPITAL MATTRESS "PRO I"** with dimensions 191 x 82 x 14cm is suitable for the size of the bed.

7. Specifications

Model	0805905
Description	HOSPITAL BED
Functions	Electrical & Manual
Frame	Steel
Bed platform	Steel
Overall Length (without bed extension)	202cm
Overall Length (with bed extension)	222cm
Overall width (with siderails up)	100cm
Overall width (with siderails down)	98cm
Mattress platform	196 x 90cm
Minimum Height	56 cm
Maximum Height	98 cm
Backrest raising tilt	0-75°
Legrest raising tilt	0-45°
Trendelenburg	0-15°
Reverse Trendelenburg	0-15°
Castors	4 pcs , 15cm , with brakes
Fifth wheel	1 pc, 10cm
Max load	250 Kg
Voltage	100-240V
Frequency	50/60 Hz
Hospital grade wire and plug Water resistance degree	IPX4
Product Net weight	250kg
Frame painting	Electrostatic
Motors	5


8. Precautions For Use


- Do not exceed the maximum load capacity for any reason.
- When lowering the head or foot section, make sure that nobody inserts hands, legs or other body parts under the bed base.
- Make sure that the floor surface supporting the bed is flat**.**


9. Before Every Use:


- Check if the frame is damaged in order to guarantee a safe use of the product. (There are no cracks or fractures in the frame).
- In case of damage do not use the product and contact your dealer for further instructions.
- Check, if the product is properly assembled and all screws are secure and well screwed on.
- Always check the condition of wear for the mechanical parts to ensure the absolute safe use of the product for people and objects.
- In case of damage do not use the product and contact your dealer for further instructions.

Pictures of Correct and Incorrect Use of Product

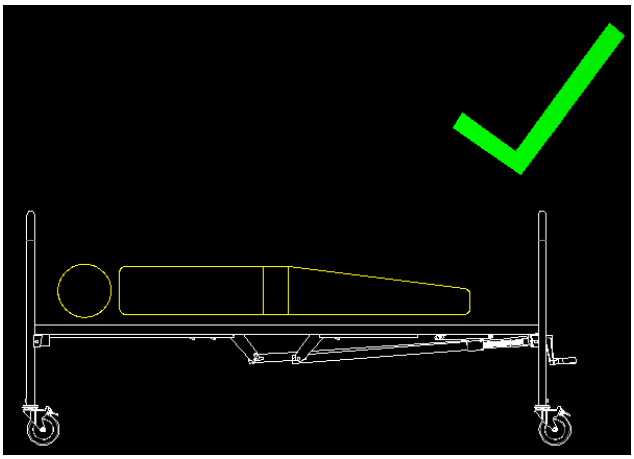

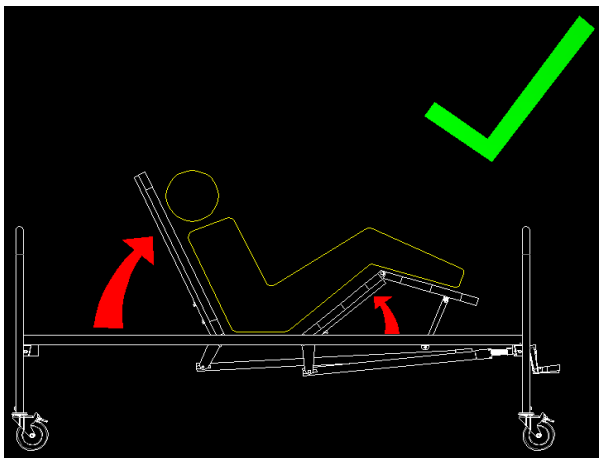

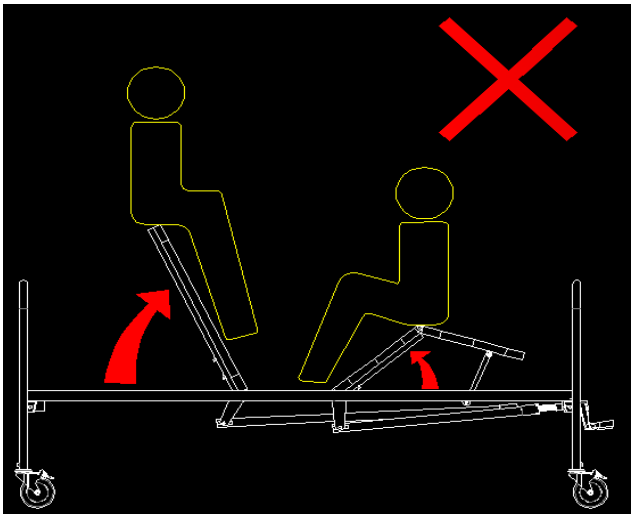

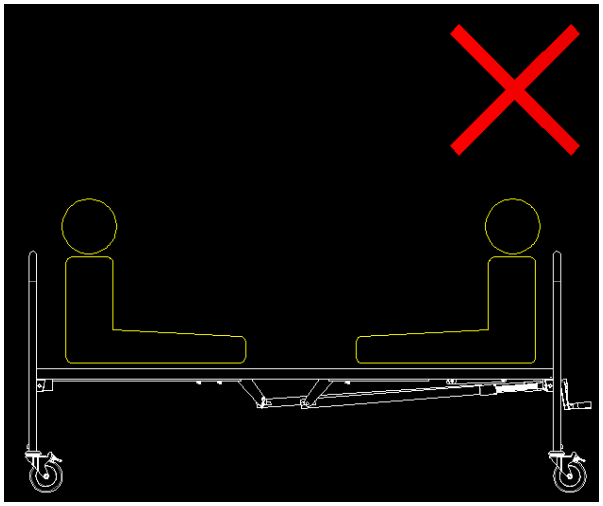

10. Assembling:

- The product comes assembled ready for use.
- Remove the product from the packaging.
- Release all connections and wiring from the ties.
- Plug the power cord into a power outlet.
- Press the appropriate buttons on the control panel to adjust the backrest, leg & knee tilt as well as the desired height of the bed from the floor.
- You will need to install the rails and the head and footboard

NOTE: The assembly illustrations are indicative to make assembly easier and may differ from reality. The package includes tools for assembly.

.Head-board installation



Insert the head- board to the hole.

Turn the hook to the hole if need to lock the head-board.



Foot board installation



Insert the foot-board until heard “Click” sound.

To remove foot board, force the latch outwards and pull the foot board out.



Fifth wheel pedal



Brake pedal

Pull this lever to lay down the side rail.

Indicator Light




When enabled, it is green

When it is Green the central brake is not activated




The light turns green when the "night light" is activated.

Built-in bed controller

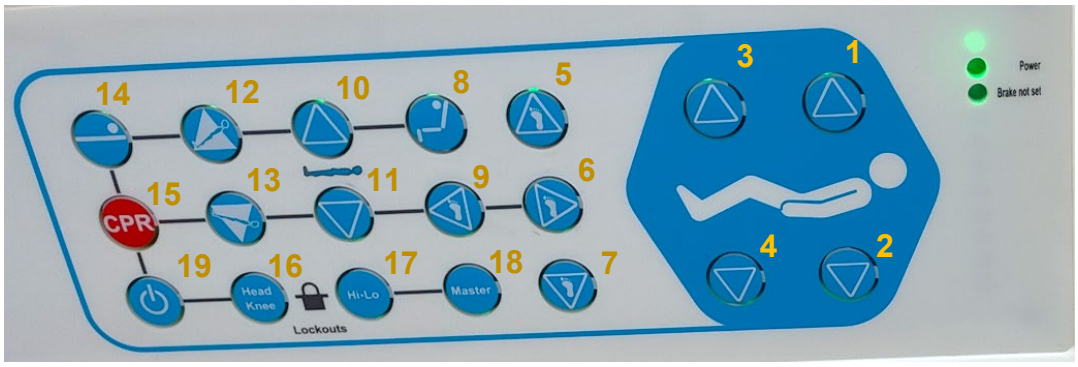

1) Backrest Up
2) Backrest Down
3) Knees Up
4) Knees Down
5) Leg Lift
6) Leg Extension (Outwards)
7) Leg Fold Down
8) One-button Chair Position
9) Leg Extension Fold Down
10) Bed rising height
11) Bed lowering height
12) Reversed Trendelenburg
13) Trendelenburg
14) Electric recovery to flat position
15) Electronic CPR Button
16) Foot & Head Lock
17) Bed Height Lock
18) All Functions Lock
19) On/Off

Wired controller

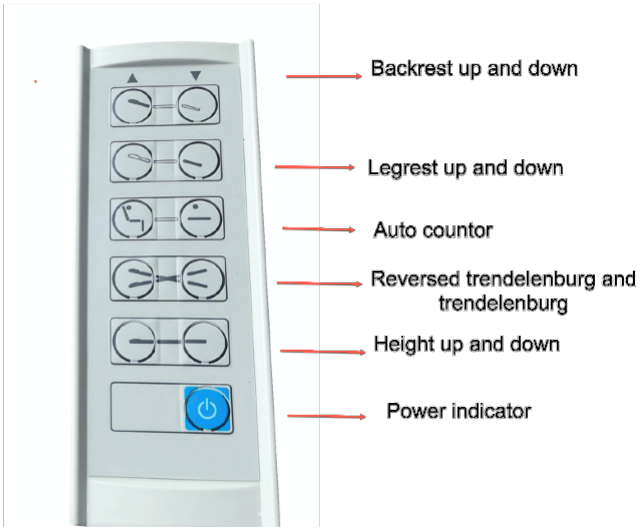

Oxygen cylinder holder

Fit the oxygen cylinder holder to the headboard

It is suitable for 2,3 liters oxygen cylinders



11. Maintenance:

Check the Product after each use. The inspection is intended to investigate anything that may compromise the integrity and proper operation of the product. Check the product for any looseness, cracks, breaks, bent or damaged parts.

WARNING
In the event of a problem occurs, **DO NOT** use the product until the issue will be repaired.

12. Cleaning And Disinfection:

- You can use a wet cloth and mild soap on the surfaces that need a cleaning.
- DO NOT leave the product wet or soiled with dust.
- Do not use chemical cleaners to clean the frame. This may damage the product's coating surface.
- CAUTION**:** Do not use acidic or caustic solutions**,** Do not use solvents or stain removers.
- If you must disinfect the product, use a common, mild disinfectant, after reading the instructions provided by the disinfectant manufacturer.
- Protect the product from scratches, cuts and punctures.

13. Conditions of Storage and Transport

The product should be stored packaged under the following conditions:

- The product should be placed in a dry and ventilated place and should not be placed in an environment with high and rapid changes of temperature.
- DO NOT store the product in locations that are close to high temperature sources or direct sunlight for long periods of time.
- The product should be isolated from chemicals and corrosive substances.
- The product should be packaged to protect it from dust, and parts that may be affected or damaged by oxidation should be lightly lubricated.
- The product can be transported by any common vehicle.

14. Environmental Protection Statement:

If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:
1) Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
3) Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the product’s components.
4) The electrical products due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards

15. Incident Reporting:

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.

16. Declaration Of Conformity:

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 2017/745 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

17. Terms of Warranty:

The product is guaranteed for a period of three (3) years warranty from the purchasing date.

The warranty apply on factory defects & DOES NOT cover damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse, or non-compliance with the product's operating instructions. Also DOES NOT cover the parts that can wear out during use or over time, like the upholstery, wheels, wheel tire, safety belt, footrests or brakes.

Damages or defects caused by: natural disasters, unauthorized maintenance or repair, power supply problems (where applicable) & carriers are not covered by the warranty.

No service or spare part is covered unless it has been inspected by an authorized service department or the manufacturer of the product. Shipping costs for goods of warranty are to be paid by the user- customer or by dealer.

When the user or the provider apply on warranty request, provide a valid proof of purchase and the completed warranty form, with a photo of the product serial number and a photo or video of the problem that has occurred. In the event the user cannot provide the above documents, if we can confirm that the product or part is still within the warranty period, we may be able to honor the user's request for coverage under warranty, but we are not obligated to do so.

Warranty Form



`BUYERS DETAILS:	
FULL NAME:	
PHONE:	
PURCHASING DATE:	
INVOICE NUMBER:	
SERIAL NUMBER:	
LOT:	
DEALER DETAILS:	
FULL NAME:	
ADDRESS:	
PHONE:	
	DEALER SIGN AND SIGNATURE

CE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΣΥΜΒΟΛΑ ANNEX A. SYMBOLS

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

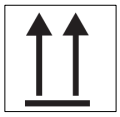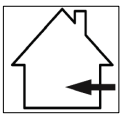MD	**Ιατρική Συσκευή.** **Medical Device.**	CE	**Σήμα συμμόρφωσης CE.** **CE Mark.**
	**Κατασκευαστής.** **Manufacturer.**		**Ημερομηνία Παραγωγής.** **Production Date.**
REF	**Κωδικός Προϊόντος.** **Product Number.**		**Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης.** **Read the instruction for use.**
SN	**Σειριακός Αριθμός.** **Serial Number.**		**Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο.** **Do not use if Package is Damage.**
LOT	**Αριθμός Παρτίδας.** **Batch Number.**		**Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά.** **Right Way Up.**
UDI	**Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος.** **Unique Device Identification.**		**Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια.** **Keep away from sunlight.**
	**Διατηρήστε Στεγνό.** **Keep Dry.**		**΄Υψος στοίβαξης 3 κιβώτια.** **Stacking Height.**
	**Χειριστείτε με προσοχή.** **Handle With Care.**		**Εύθραυστο.** **Fragile.**
	**Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο.** **In Door Use Only.**		**Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων.** **Waste Electrical and Electronic Equipment Directive.**