


# P2-E6 ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

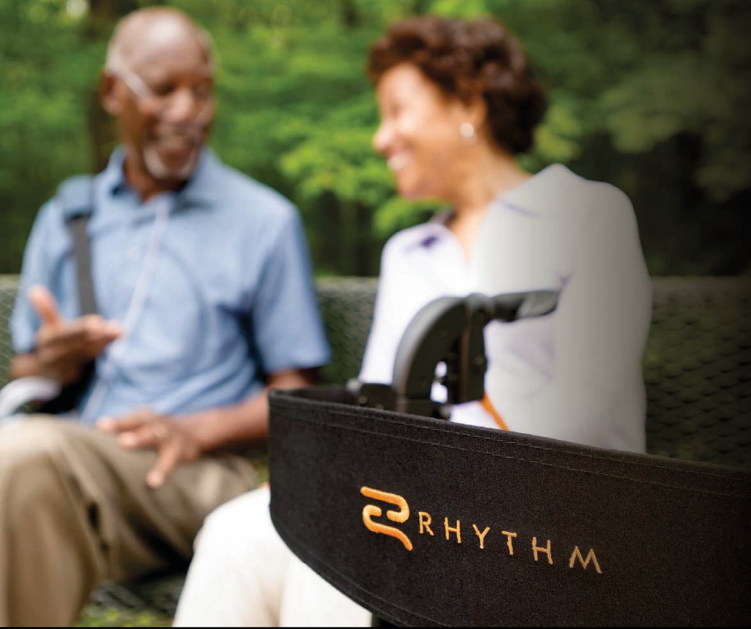

Ο φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου P2-E6 της Rhythm Healthcare έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους ασθενείς μεγαλύτερη ελευθερία στην καθημερινότητά τους. Σε σύγκριση με φορητούς συμπυκνωτές 5 ρυθμίσεων, που αποτελούν τη συνηθέστερη επιλογή στην αγορά, ο P2-E6 προσφέρει έως και 20% περισσότερο οξυγόνο, είναι έως 13% ελαφρύτερος και προσφέρει έως 27% μεγαλύτερη αυτονομία μπαταρίας. Με αυτόν τον συνδυασμό, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες περισσότερων ασθενών και να υποστηρίξει μια πιο άνετη και πιο ενεργή καθημερινότητα.

## Ελαφρύς, μόλις 1,98 kg

Όταν ο ασθενής μεταφέρει τη συσκευή σε καθημερινή βάση, το χαμηλό βάρος κάνει ουσιαστική διαφορά. Με βάρος μόλις 1,98 kg, ο P2-E6 ανήκει στους ελαφρύτερους φορητούς συμπυκνωτές της κατηγορίας του και διευκολύνει αισθητά τη μεταφορά και τη χρήση του μέσα στην ημέρα.



## Σχεδιασμένος για χρήση όλο το 24ωρο, ακόμη και στις μετακινήσεις

Ο φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου P2-E6 διαθέτει τεχνολογία Auto-Pulse, σχεδιασμένη να υποστηρίζει τη χρήση της συσκευής όταν η αναπνοή γίνεται πιο

ρηχή, ιδιαίτερα κατά τον ύπνο. Αν δεν ανιχνευθεί αναπνοή για 15 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται αυτόματη παλμική χορήγηση οξυγόνου. Έτσι, ο χρήστης έχει μεγαλύτερη σιγουριά για συνεχή χρήση της συσκευής μέσα στην ημέρα και τη νύχτα, ακόμη και στις μετακινήσεις.

## Μεγάλη αυτονομία μπαταρίας

Με αυτονομία έως και 5,5 ώρες, ο φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου P2-E6 δίνει στον ασθενή μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων μέσα στην ημέρα. Για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, διατίθενται προαιρετικά επιπλέον μπαταρίες και εξωτερικός φορτιστής μπαταρίας.

Αυτονομία ανά ρύθμιση	
Ρυθμηση	Χρόνος
1	5ώρ. 24λεπ.
2	4ώρ. 48λεπ.
3	3ώρ. 18λεπ.
4	2ώρ. 30λεπ.
5	2ώρ. 06λεπ.
6	1ώρ. 42λεπ.

## Περισσότερο οξυγόνο, σε 6 ρυθμίσεις

Με μέγιστη παροχή οξυγόνου 1200 ml/min και 6 ρυθμίσεις παλμικής ροής, ο φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου P2-E6 μπορεί να καλύψει τις ανάγκες περισσότερων ασθενών με διαφορετικές απαιτήσεις οξυγονοθεραπείας. Από μια σύντομη έξοδο μέχρι μια ημέρα με αυξημένες μετακινήσεις, προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και περισσότερη αυτονομία.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ						
Ρυθμός	1	2	3	4	5	6
	Όγκος παλμού (ml) ανά ρυθμό αναπνοής					
10	21	42	63	84	100	120
15	14	28	42	56	66.7	80
20	10.5	21	31.5	42	50	60
25	8.4	16.8	25.2	33.6	40	48
30	7	14	21	28	33.3	40
35	6	12	18	24	28.6	34
40	5.3	10.5	15.8	21	25	30

# P2-E6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάρος	1,98 kg	
Μέγιστη παροχή οξυγόνου	1200 ml/min	
Επίπεδο θορύβου	36 dBA στη ρύθμιση 2	
Τεχνολογία Auto-Pulse	Ενεργοποιείται μετά από 15δευτ. χωρίς ανίχνευση αναπνοής	
Εγγύηση	Συσκευή	3 έτη
	Στήλες Ζεόλιθου	2 έτος
	Μπαταρία	1 έτος



Ο φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου P2-E6 είναι κατάλληλος για ταξίδια και πληροί τα ισχύοντα κριτήρια της FAA για μεταφορά και χρήση εντός αεροσκάφους.