



100
ΧΡΟΝΙΑ
1919-2019




«Επίσημος Υποστηρικτής
της Ελληνικής
Παραολυμπιακής Ομάδας»

amparo

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΚΝΗΜΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

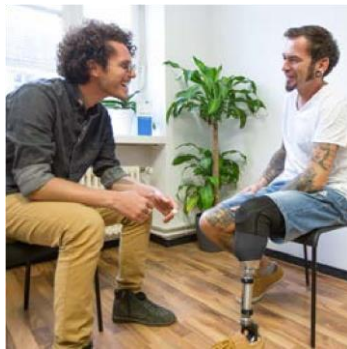

Η κνημιαία πρόθεση επιτόπιας εφαρμογής αποτελεί μια επαναστατική λύση στην τεχνολογία των προθέσεων του κάτω γόνατος. Όταν εφαρμοστεί η τεχνική απευθείας τοποθέτησης κατά την προσαρμογή της πρόθεσης επιτρέπει μια απίστευτα διαισθητική και αποτελεσματική εφαρμογή με πολύ χαμηλό περιθώριο σφάλματος. Χάρη στη θερμοπλαστικό υλικό, η θήκη μπορεί να επαναδιαμορφωθεί αρκετές φορές, για να επιτρέψει αλλαγές στον όγκο του κολοβώματος του χρήστη. Η πρόθεση έρχεται με μια προ-συναρμολογημένη και προ-τοποθετημένη εξωτερικά από τη θήκη, πλάκα στερέωσης και τη μονάδα ανάρτησης κατ'επιλογή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος Ακρωτηριασμού: Κνημιαίος/ Κάτω από το γόνατο

Τύπος Θήκης: Total-Surface-Bearing (TSB)/Ολική επιφάνεια στήριξης
Kondylen-Bettung Münster (KBM)/
Επικονδυλική Στήριξη
Patellar Tendon Bearing
(PTB)/Υποεπιγονατιδική στήριξη

Σύστημα ανάρτησης: Ασφάλιση με αναρόφηση
Ασφάλιση με πείρο

Υλικά: Χαμηλής θερμοκρασίας θερμοπλαστικός κώνος με προ-συναρμολογημένη πλάκα στερέωσης από αλουμίνιο


Απόσταση: 1 cm

Επαναδιαμορφώσεις: 10 φορές




ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η κνημιαία πρόθεση επιτόπιας εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλιση με αναρρόφηση και βαλβίδα ή με πείρο, σε μεγέθη Small ή Large.

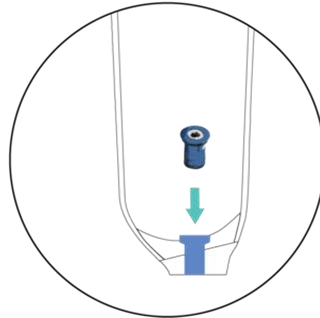

Ασφάλιση με αναρρόφηση και βαλβίδα

Προσφέρει μεγάλη άνεση και αξιοπιστία στους ακρωτηριασμένους. Η βαλβίδα δημιουργεί μια άνετη εφαρμογή χωρίς να οδηγεί σε περιοχές υψηλής πίεσης. Χρησιμοποιείται με επιγονατίδα σιλικόνης.

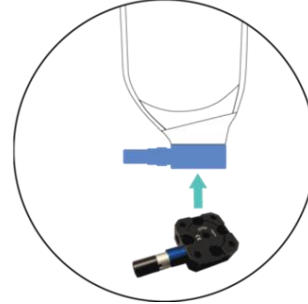

Ασφάλιση με πείρο

Είναι ένα σύστημα ασφάλισης του κολοβώματος με πείρο. Ο πείρος ασφαρίζει σε έναν ειδικό αντάπτορα στο κάτω μέρος της θήκης. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για την επιγονατίδα, και επιτρέπει την εφαρμογή και αφαίρεση με μηχανισμό γρήγορης απελευθέρωσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΗΚΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

| Πρόθεση | Θήκη με βαλβίδα Small | Θήκη με βαλβίδα Large | Θήκη με πείρο Small | Θήκη με πείρο Large |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Κωδικός | 102-CSBK-V-S | 102-CSBK-V-L | 102-CSBK-P-S | 102-CSBK-P-L |
| Μέγιστο βάρος χρήστη | 125 κιλά | 150 κιλά | 125 κιλά | 150 κιλά |
| Περιφέρεια άκρης κολοβώματος | 23-34 εκ | 30-45 εκ | 23-34 εκ | 30-45 εκ |
| Μέγιστο μήκος κολοβώματος | 27 εκ | 27 εκ | 27 εκ | 27 εκ |
| Βάρος Θήκης* | 1.100 g | 1.320 g | 1040 g | 1300 g |
| Χρώμα | μαύρο | μαύρο | μαύρο | μαύρο |

*Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 200-800gr θα αφαιρεθούν αναλόγως με το μήκος του κολοβώματος

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ*

Βαλβίδα



| | |
|------------|----------------|
| Κωδικός | 101-VAL |
| Βάρος | 20g |
| Διαστάσεις | 18x 19 x 19 mm |

Ασφάλεια σιλικόνης



| | |
|---------|------------|
| Κωδικός | 01-165.303 |
| Βάρος | 125g |

* Οι μονάδες ανάρτησης δεν συμπεριλαμβάνονται στο kit αλλά πρέπει να γίνεται ξεχωριστή παραγγελία

Κάλτσα σιλικόνης Dreamliner χωρίς πύρο 3mm

| Κωδικός | Μέγεθος | Πάχος | Μήκος |
|--------------|---|-------|-------|
| 01-165.02C-3 | 210,220,235,250,265,280,300, 320,340,360,380,400,420,440 mm | 3mm | 44cm |



01-165.01C-3 Κάλτσα σιλικόνης Dreamliner

| Κωδικός | Μέγεθος | Πάχος | Μήκος |
|--------------|---|-------|-------|
| 01-165.01C-3 | 210,220,235,250,265,280,300, 320,340,360,380,400,420,440 mm | 3mm | 44cm |



Επιγονατίδα σιλικόνης Iceflex Balance

Η επιγονατίδα Iceflex Balance διαθέτει μαλακή σιλικόνη και ένα νάιλον / Lycra κάλυμμα. Το νάιλον εξασφαλίζει την αντοχή και η Lycra παρέχει ελαστικότητα, ενώ η σιλικόνη μας προσφέρει τη βέλτιστη πρόσφυση. Αυτός ο συνδυασμός εγγυάται άνεση και αντοχή. Για το κατάλληλο μέγεθος μετρήστε τη περιφέρεια του μηρού 15εκ. πάνω από το μέσο του γόνατος.

| Μέγεθος | Μήκος | Περιφέρεια |
|---------|-------|------------|
| 35 | 36cm | 35-41cm |
| 49 | 36cm | 49-55cm |
| 62 | 36cm | 62-69cm |



Σωλήνας με υποδοχή πυραμίδας 30mm
Ατσάλι-τιτάνιο-αλουμίνιο

| Κωδικός | Μήκος | Υλικό | Βάρος φορτίου | Βάρος |
|------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 01-165.12S | 400/250mm | Ατσάλι | 125kg | 272/207gr |
| 01-165.12T | 400/250mm | Τιτάνιο | 125kg | 231/162gr |
| 01-165.12A | 400/250mm | Αλουμίνιο | 125kg | 231/162gr |



Αντάπτορας με υποδοχή πυραμίδας
& υποδοχή σωλήνα (ποτηράκι)/τιτάνιο – ατσάλι

| Κωδικός | Υλικό | Βάρος φορτίου | Βάρος |
|------------|-----------|---------------|-------|
| 01-165.15T | Τιτάνιο | 125kg | 90gr |
| 01-165.15S | Ατσάλι | 125kg | 123gr |
| 01-165.15A | Αλουμίνιο | 100kg | 78gr |



Συνδετικός αντάπτορας θήκης με πυραμίδα

| Κωδικός | Υλικό | Βάρος φορτίου | Βάρος |
|------------|-----------|---------------|-------|
| 01-165.17S | Ατσάλι | 125kg | 93gr |
| 01-165.17T | Τιτάνιο | 125kg | 56gr |
| 01-165.17A | Αλουμίνιο | 100kg | 50gr |



Συνδετικός αντάπτορας θήκης με περιστρεφόμενη πυραμίδα

| Κωδικός | Υλικό | Βάρος φορτίου | Βάρος |
|------------|-----------|---------------|-------|
| 01-165.18S | Ατσάλι | 125kg | 120gr |
| 01-165.18T | Τιτάνιο | 125kg | 74gr |
| 01-165.18A | Αλουμίνιο | 100kg | 115gr |



ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Φορητός φούρνος

- Για ισομερές ζέσταμα της πρόθεσης
- Χρησιμοποιείται πιστόλι ζεστού αέρα/θερμότητας

Κωδικός 901-MO

Περιεχόμενα Φουρνάκι με κάλυμμα, stand, βάση σιλικόνης & Καπάκι μόνωσης



Κινητή αντλία αναρρόφησης

- Για εφαρμογή εντός και εκτός κλινικής

Κωδικός 901-VP

Βάρος 4.4 kg

Διαστάσεις 30.5 x 12 x 17 cm

Μέγιστη αναρρόφηση 0.8 bar

Ρυθμός ροής 68 l/min

Σύνδεσμος για την αντλία

- Συνδέει την κινητή αντλία αναρρόφησης με την κνημιαία πρόθεση

Κωδικός 901-VA

Προδιαγραφές: Συνοδεύεται από μανόμετρο & φίλτρο



Μαξιλαράκια ανύψωσης σειτ

- δημιουργεί επιπλέον χώρο στην υποδοχή για ευαίσθητες περιοχές κατά την προσαρμογή

Κωδικός 901-SP

Προδιαγραφές 6x pads σιλικόνης, 2 από κάθε σχήμα

Διαστάσεις 3 x 7 x 3cm, 7.5 x 8.2 x 3cm, 3.5 x 3.5 x 3cm



Τσάντα αποθήκευσης εργαλείων

- Προστατεύει και διαχωρίζει τα εργαλεία κατά τη μεταφορά

Κωδικός 901-TSB(TD)

Προδιαγραφές με επένδυση, ρυθμιζόμενα διαχωριστικά, λαβή

Εξωτερικές Διαστάσεις 48 x 34.5 x 19.5 cm

Βάρος 1.35 kg

Τσάντα εργαστηρίου

- μπορεί να χωρέσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την θεραπεία

| | |
|-----------------------|---|
| Κωδικός | 901-WB |
| Προδιαγραφές | 2 τροχοί, λαβή με επέκταση, 111-120 λίτρα |
| Εξωτερικές Διαστάσεις | 43 x 36 x 79 cm |
| Βάρος | 2.8 kg |



ΒΑΣΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Πιστόλι ζεστού αέρα/θερμότητας

- Μεγάλη ισχύς
- Ιδανικό για φορητούς φούρνους και επί τόπου ρυθμίσεις

Κωδικός ΑΠΔ



Ψαλίδι για δέρματα

- Καμπυλωτή λεπίδα για μαλακές καμπύλες και μικρές ακτίνες
- Κατάλληλο για τη δημιουργία του περιγράμματος της υποδοχής

Κωδικός ΑΠΔ



Κλωστοϋφαντουργικό ψαλίδι

- Αδιαμφισβήτητα κατάλληλο για υφάσματα και θερμοπλαστικό

Κωδικός ΑΠΔ



Γάντια θερμότητας

- Μακρύ σχήμα που προστατεύει τα χέρια και τους καρπούς
- Σφιχτό για καλή επιδεξιότητα κατά τη διαμόρφωση της θήκης

Κωδικός ΑΠΔ



Βάση ελαστικής διαφάνειας

- Γρηγορότερη και ευκολότερη εφαρμογή του αλουμινίου

Κωδικός 901- SFH

Προδιαγραφές 4 cm διάμετρος



Υφασμάτινη τσάντα

Μπλε τσάντα με το σήμα της Amparo

Κωδικός 901- FBA

Προδιαγραφές 100% βαμβάκι, χρώμα μπλε



ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Διαφάνεια ελαστική για μόνωση στην λήψη μέτρων

- Εξαιρετικά ανθεκτικό & αδιάβροχο, δεν συγκολλάται με θερμοπλαστικό
- Κατάλληλο για συμπίεση και αναρρόφηση κενού

Κωδικός 901-SF

Προδιαγραφές ρολό 150 m x 10 cm



Σπρέυ Ψύξης*

- Επιταχύνει την ψύξη και τη στερέωση

Κωδικός 901-IS

Προδιαγραφές 400 ml



Κάλτσα Perlon για λήψη μέτρων-χύτευση υφασμάτων

- Εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή κατά την αναρρόφηση
- Δεν συγκολλάται με το θερμοπλαστικό

Κωδικός 901-MT

Προδιαγραφές ca. 10 m



* Επί του παρόντος το σπρέυ διατίθεται μόνο Γερμανία, Αυστρία & Ελβετία.

Μολύβι σήμανσης

- Κατάλληλο για τη σήμανση περιγράμματος της πρόθεσης
- Σκουπίζεται εύκολα

Κωδικός 901-MP

Προδιαγραφές Διαλύεται στο νερό



ΣΕΤ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για πρακτική και αποτελεσματική παραγγελία τα εργαλεία, αξεσουάρ και αναλώσιμα μπορούν επίσης να παραγγελθούν ως μέρος σετ προϊόντων

Amparo Σετ εργαλείων

Κωδικός 501-TS

αποτελείται από

- 901-Φορητό φούρνο
- 901-VP Κινητή αντλία αναρρόφησης
- 901-VA Σύνδεσμος αντλίας
- 901-SP Μαξιλαράκια ανύψωσης
- 901- TSB Τσάντα αποθήκευσης εργαλείων
- 901-WB Τσάντα εργαστηρίου



Σετ βασικών αξεσουάρ

Κωδικός 501-AS

αποτελείται από

- ΑΠΔ-Πιστόλι θερμότητας
- ΑΠΔ- Ψαλίδι για δέρματα
- ΑΠΔ-Κλωστοϋφαντουργικό ψαλίδι
- ΑΠΔ-Γάντια Θερμότητας
- 901-SFH-Βάση ελαστικής διαφάνειας
- 901-FBA- Υφασμάτινη Τσάντα



Εγκεκριμένο σύνολο αναλώσιμων

Κωδικός 501-CS

Αποτελείται από

- 901-SF Ελαστική διαφάνεια
- 901-IS Σπρέυ ψύξης*
- 901-MT Κάλτσα για λήψη μέτρων/χύτευση υφασμάτων
- 901-MT Μολύβι Σήμανσης



* Επί του παρόντος το σπρέυ διατίθεται μόνο Γερμανία, Αυστρία & Ελβετία